



Cirúrgica

SOLUÇÕES SEM
FRONTEIRAS
PARA A SAÚDE



CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS



Cirúrgica

A MEM Cirúrgica Ltda. nasceu em Outubro de 2001 com o propósito de oferecer ao mercado médico-hospitalar do Brasil a mais alta qualidade de materiais cirúrgicos e serviços de assistência técnica.

Nosso objetivo é suprir as necessidades existentes no mercado, cooperando no salvamento de vidas, minimizando traumas pós-cirúrgicos e reduzindo custos médicos. A MEM Cirúrgica é especializada na distribuição destes produtos para todo o Brasil através de uma rede de distribuidores e oferece o que há de mais adequado para diversas áreas.



Rua Marechal Malet, 482
Parque da Vila Prudente
São Paulo - Brasil



memcirurgica@memcirurgica.com.br



+55 (11) 5539-7557

SUMÁRIO

PARA NAVEGAR
DE FORMA MAIS RÁPIDA
PELO CATÁLOGO,
CLIQUE NO ÍTEM DESEJADO
E ACESSE DIRETAMENTE
O PRODUTO DESEJADO.


ÍNDICE

 PRODUTO 01

SEQUA™ SKIN CLOSURE	04
CURATIVO MESON	05
CURATIVO MESON IMPERMEÁVEL	06
CURATIVO MEM PARA TRAQUEOSTOMIA	07
CURATIVO MESONPORE I.V	08
EYEGARD - PROTETOR OCULAR	09
CANETAS ESTÉREIS	10
CANETA NÃO-ESTÉRIL	10
ACCORDION MEDICAL	11
ACCORDION COAX	12
ACCORDION PICCOLO	13
CONSOLE NUCLOTOME	14
KIT DE CÂNULAS NUCLEOTOME	15
CAREVATURE CÂNULA DREAL	16
TORNIQUETE PNEUMÁTICO	17
AQUANOT	18
MANTAS ABSORVENTES	19
TUBOS PLÁSTICOS	20
SMART CABINET	21

SEQUA™ SKIN CLOSURE

Registro ANVISA: 80109170025

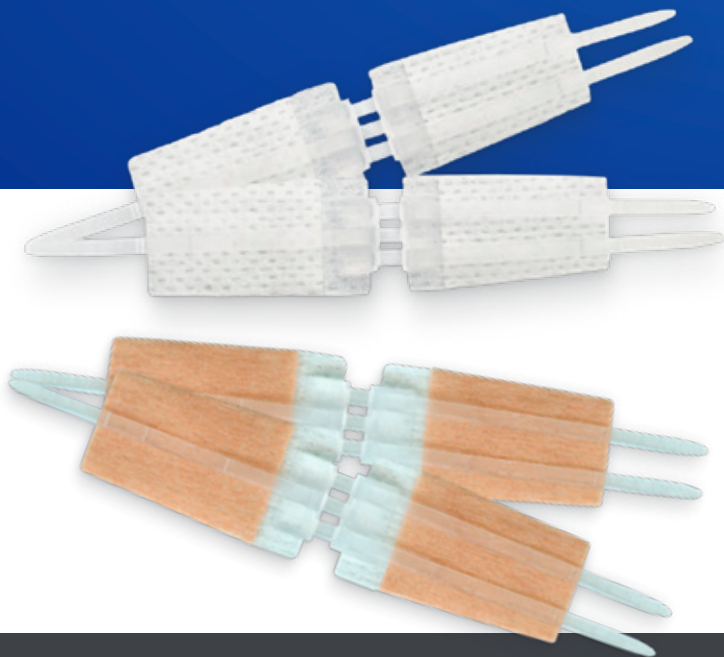

TECNOLOGIA PATENTEADA

- Fechamento não invasivo, sem suturas, menos cicatriz
- Rápido para aplicar
- De fácil uso

É um novo dispositivo para o rápido e fácil fechamento da maioria das feridas agudas, por exemplo, as cirúrgicas e as laceradas.

O Skin Closure foi projetado para permitir um fechamento não invasivo de uma ferida e para estimular o melhor fechamento da pele, para uma cicatrização precoce e bem-sucedida.

A técnica não invasiva reduz o trauma tecidual, melhora o conforto do paciente, minimizando as cicatrizes após o processo de cicatrização.

Dispositivo estéril de fechamento de ferida (branco)

Envelope com 1 pç. (caixa com 10 envelopes)

Ref.: LKB1001

Dispositivo estéril de fechamento de ferida (branco)

Envelope com 2 pçs. (caixa com 10 envelopes)

Ref.: LKB1002

Dispositivo estéril de fechamento de ferida (branco)

Envelope com 3 pçs. (caixa com 10 envelopes)

Ref.: LKB1003

Dispositivo estéril de fechamento de ferida (branco)

Envelope com 4 pçs. (caixa com 10 envelopes)

Ref.: LKB1004

Dispositivo estéril de fechamento de ferida (branco)

Envelope com 5 pçs. (caixa com 10 envelopes)

Ref.: LKB1005

Dispositivo estéril de fechamento de ferida (bege)

Envelope com 2 pçs. (caixa com 10 envelopes)

Ref.: LKF1002

Dispositivo estéril de fechamento de ferida (bege)

Envelope com 4 pçs. (caixa com 10 envelopes)

Ref.: LKF1004



CURATIVO MESON

Registro ANVISA: 80109170028



EXEMPLOS DE APLICAÇÕES:

- Feridas agudas, como abrasões e lacerações.
- Queimaduras superficiais e de espessura parcial.
- Feridas de drenagem leve a moderada.
- Para proteger ou cobrir dispositivos.
- Sobre hidrogéis, alginatos e gaze.



O Curativo Meson possui almofada absorvente que protege a ferida e absorve o exsudato. É poroso e respirável para melhor troca de vapor de umidade e oxigênio, e risco reduzido de maceração da pele.

Almofada única não gruda na ferida permitindo que o processo de cicatrização ocorra com menos dor e trauma.

Também pode ser usado para proteger a ferida do cordão umbilical do bebê.

Curativo - 10 x 12 cm

Almofada 7 x 7 cm (caixa com 50)

Ref.: MEM001

Curativo - 15 x 15 cm

Almofada 9 x 11,5 cm (caixa com 25)

Ref.: MEM002

Curativo - 6 x 7 cm

Almofada 3 x 4 cm (caixa com 50)

Ref.: MS2201

Curativo - 7 x 10 cm

Almofada 3 x 5 cm (caixa com 50)

Ref.: MS2202

Curativo - 10 x 10 cm

Almofada 5 x 5 cm (caixa com 50)

Ref.: MS2203

Curativo - 10 x 15 cm


Almofada 5 x 10 cm (caixa com 25)

Ref.: MS2204



CURATIVO MESON IMPERMEÁVEL

Registro ANVISA: 80109170032

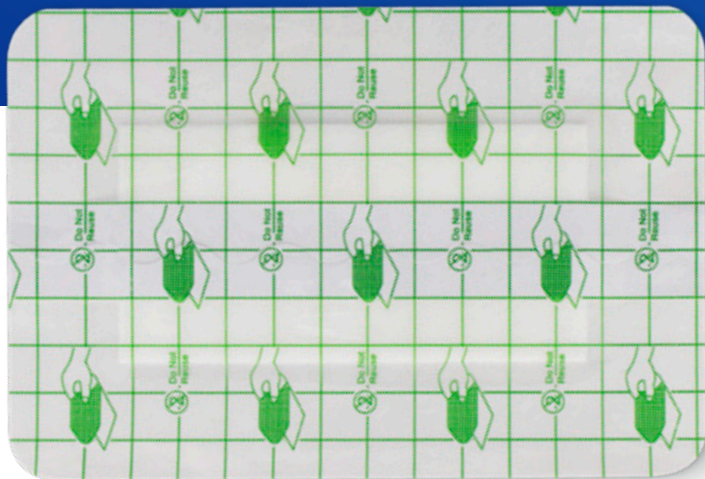

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

- Todo tipo de feridas exsudativas moderadas e altas
- Feridas agudas e hemorrágicas ou difíceis de cicatrizar
- Lacuna, feridas de antro ou úlcera dérmica
- Queimaduras de primeiro e segundo grau

Transparente, proporcionando observação contínua da pele.

Está em conformidade com os contornos do corpo e flexiona com o movimento do paciente sem estresse sobre a pele.

À prova d'água, uma película transparente permite a troca de oxigênio eficaz enquanto ajuda a proteger contra contaminantes externos, incluindo os mais comumente associados com cateter.

Curativo impermeável - 10 x 15 cm

Almofada 5 x 10 cm (caixa com 25)

Ref.: MEMP005

Curativo impermeável - 10 x 30 cm

Almofada 5 x 25 cm (caixa com 25)

Ref.: MEMP008



CURATIVO MEM PARA TRAQUEOSTOMIA

Registro ANVISA: 80109170030

Devido à sua estrutura altamente porosa e sua afinidade pela água e líquidos corpóreos, quando em contato com a ferida a espuma absorve grande quantidade de exsudato e o retém em seus poros, tornando-se hidratada.

Este equilíbrio entre absorção e manutenção da hidratação promove uma umidade adequada do leito da ferida, favorecendo o processo de cicatrização, formação do tecido de granulação e epitelização, além de permitir a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado.



INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, TAIS COMO:

- Deiscências pós-operatórias
- Traqueostomias locais
- Inserção de drenos

Curativo MEM para Traqueostomia - 8 x 9 cm

Espessura 2mm, orifício 1 cm (caixa com 10)

Ref.: MEMT001



CURATIVO MESONPORE I.V.

Registro ANVISA: 80109170033

Projetado para encaixar facilmente o hub e promover maior segurança em torno do cateter e dos tubos conectores.

Seu diferencial está no adesivo, que permite liberação rápida da umidade proporcionando maior tempo de uso e melhor fixação da cobertura.

Tecnologia inovadora projetada para dar maior flexibilidade à cobertura, acompanhar os movimentos do paciente e reduzir assim, a elevação das bordas.



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

- Utilizado para fixação de cateteres intravenosos.
- Proteção de feridas e queimaduras na pele.
- Prevenção de injúrias de pele causadas por atrito ou exposição contínua à umidade
- Proteção ocular durante procedimentos cirúrgicos e sobre feridas cirúrgicas limpas e fechadas.

Curativo - 10 x 12 cm, estéril

(caixa com 100)

Ref.: MEMP010

Curativo - 5 x 5,7 cm, estéril

(caixa com 100)

Ref.: MEMP011

Curativo - 8,5 x 10,5 cm, estéril

(caixa com 50)

Ref.: MEMP013



EYEGUARDIAN PROTETOR OCULAR

Registro ANVISA: 80109170031



Proteção ocular segura e transparente com lacre à prova d'água.

Alternativa simples a fita adesiva e potencialmente contaminante.

Ideal para uso noturno em pacientes que sofrem de olho seco

Fornece uma alternativa simples e econômica para curativos



IMPORTANTE

Vários estudos e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA concordam - rolos de fita podem servir como fonte de contaminação para o pessoal da instalação e pacientes que não podem ser limpos. Mude para o EyeGard para a alternativa mais limpa e segura à fita.

EyeGuardian - 5,5 x 2,9 cm
(100 pares por caixa)

Ref.: SH49369



CANETAS MARCADORAS

As canetas estéreis acompanham régua e etiquetas.

As Canetas Marcadoras ASPEN são de alta qualidade, resistentes e fornecem um traço preciso e confiável, que se mantém por tempo prolongado.

São de uso único, atóxicas e livres de látex. Disponíveis na cor violeta genciana.

ESTÉREIS

Registro ANVISA: 80109170026



Caneta Marcadora ASPEN Ponta Fina

Estéril, com régua e etiqueta (caixa com 50)

Ref.: 2630



Caneta Marcadora ASPEN Ponta Fina Moderna

Estéril, com régua e etiqueta (caixa com 50)

Ref.: 2730



Caneta Marcadora ASPEN Ponta Regular Moderna

Estéril, com régua e etiqueta (caixa com 50)

Ref.: 2750

NÃO-ESTÉRIL

Registro ANVISA: 80109170027




Caneta Marcadora ASPEN Júnior Ponta Regular

Não-estéril (caixa com 100)

Ref.: 2900BN

ACCORDION MEDICAL

Registro ANVISA: 80109179004

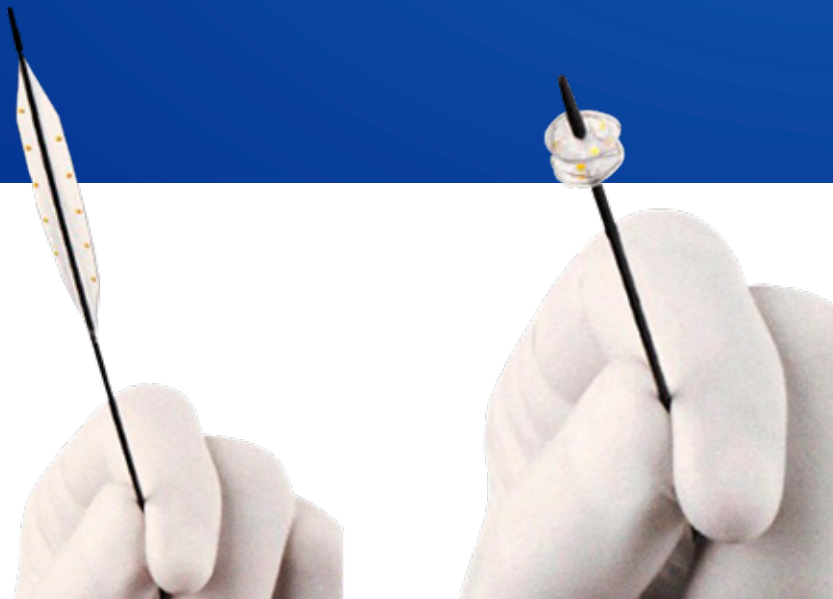

EFICAZ COMO NENHUM OUTRO

O filme obstrutor molda-se e preenche o lúmen da ureter.

Permite irrigação maior melhorando a imagem e lavagem distal contínua de pequenos fragmentos.

Fragmentos maiores podem ser varridos para a Bexiga para continuação do tratamento.

Prevenção de Migração Retrógrada de Cálculos e seus Fragmentos.

Simples e pequeno, o Accordion facilita a lavagem distal dos fragmentos durante a litotripsia endoscópica.



CLIQUE AQUI PARA ASISTIR A UMA DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO


Dispositivo Sanfonado p/ Manejo de Cálculo

Ref.: PA1205-06-10



ACCORDION COAX

Registro ANVISA: 80109179004

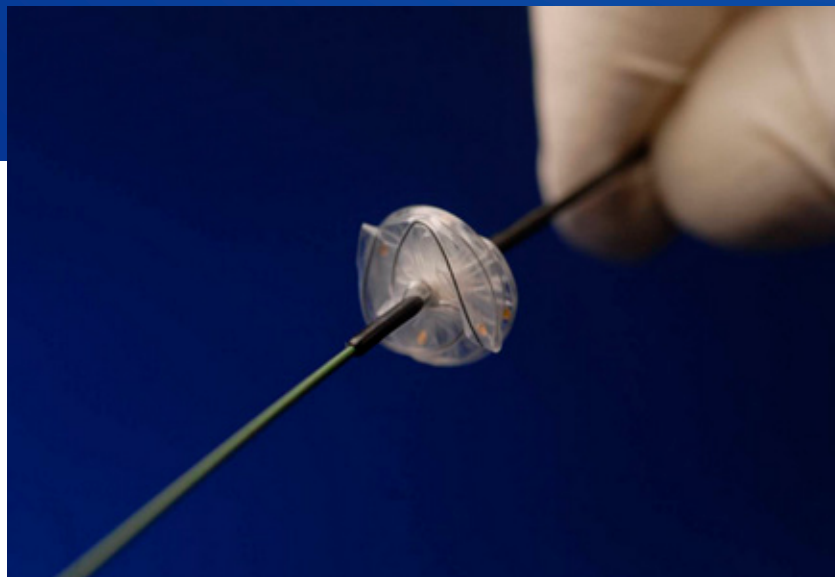

JÁ ESTAVA NA HORA!

Diferente de cateteres tipo balão, o sistema sanfonado de oclusão, oclui a passagem oferecendo uma plataforma estável difícil de ser movida durante o processo de fragmentação.

Ponta curta e afilada, revestida com material hidrofílico facilita a entrada atraumática transcutânea ou pelo orifício uretral.

Previne a migração anterógrada de fragmentos de cálculos renais em cirurgias percutâneas.

Diminui os riscos de migração ureteral de fragmentos de cálculos em cirurgia renal percutânea

Finalmente um dispositivo que oferece um controle de migração retrógrada ou anterógrada de fragmentos, durante a Nefrolitotomia Percutânea



CLIQUE AQUI PARA ASISTIR A UMA DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

Dispositivo Sanfonado p/ Controle de Cálculo

Ref.: PA1305-01-15



ACCORDION PICCOLO

Registro ANVISA: 80109179034



POSICIONAMENTO COM O FIO GUIA

O Accordion, por ser hidrofílico e possuir o fio guia, ultrapassa o cálculo com facilidade.

Sua ponta flexível (fio guia) de 6cm facilita a entrada e manutenção de acesso no orifício ureteral.

Marcas radiopacas permitem fácil monitoramento de qualquer movimento e posicionamento do dispositivo através de fluoroscopia.

Prevenção de Migração Retrógrada de Cálculos e seus Fragmentos.

Simples e pequeno, o Accordion facilita a lavagem distal dos fragmentos durante a litotripsia endoscópica.



CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR A UMA DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

Dispositivo Sanfonado p/ Controle de Cálculo

Ref.: PA1205-27-10



CONSOLE NUCLEOTOME

Registro ANVISA: 80109170024




CERTIFICADO

Produto certificado pelo Inmetro. Fabricante, Clarus Medical, certificado pela ANVISA em Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

O Console Nucleotome foi desenhado especificamente para descompressão da hérnia de disco intervertebral. Este equipamento é utilizado em conjunto com o Kit Nucleotome, descartável adquirido separadamente.

O novo design do Console Nucleotome é compacto, leve e mais silencioso durante a operação.

Características incluem uma taxa de corte ajustável e exibição do tempo decorrido. Mesmo Console para todos os modelos de Kits.

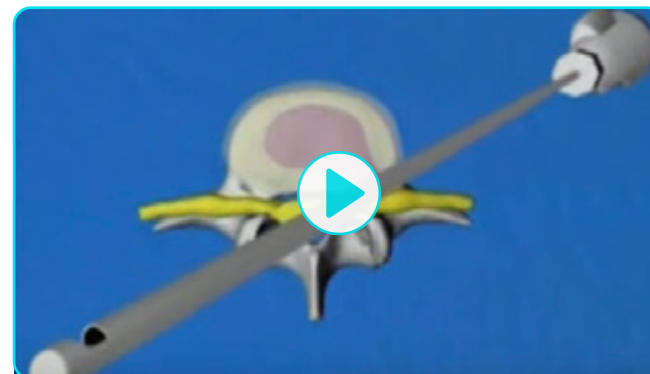

CLIQUE AQUI PARA ASISTIR A UMA DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO

Console Nucleotome

Ref.: 11000



KIT DE CANULAS NUCLEOTOME


Registro ANVISA: 80109170026

Registro ANVISA: 80109170027

O Console Nucleotome foi desenhado especificamente para descompressão da hérnia de disco intervertebral. Este equipamento é utilizado em conjunto com o Kit Nucleotome, descartável adquirido separadamente.

O novo design do Console Nucleotome é compacto, leve e mais silencioso durante a operação.

Características incluem uma taxa de corte ajustável e exibição do tempo decorrido. Mesmo Console para todos os modelos de Kits.

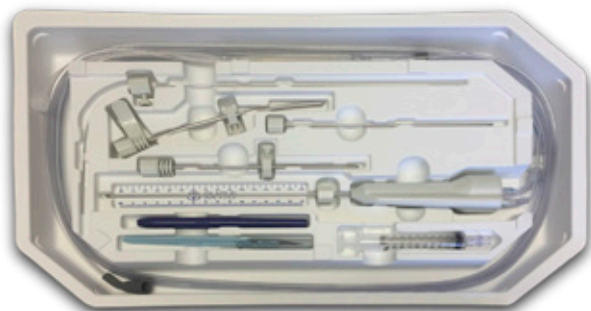

Kit de Cânulas Nucleotome Lombar

Ref.: 23500




Kit de Cânulas Nucleotome Cervical

Ref.: 21200


CAREVATURE CÂNULA DREAL

Registro ANVISA: 80109170026


O Carevature® é o primeiro e único sistema de descompressão elétrico curvado, desenvolvido para obter máxima eficiência, segurança e precisão no trabalho em torno da anatomia da coluna vertebral. Foi exclusivamente projetado para permitir um acesso mais fácil e seguro, menor trauma e custo, resultando em melhores resultados para os pacientes e para o sistema de saúde.

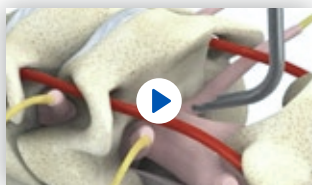

APLICAÇÃO CERVICAL

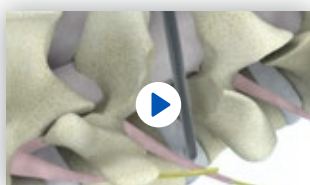

APLICAÇÃO TORÁXICA

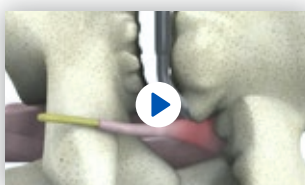

APLICAÇÃO LOMBAR

Ponta de 3mm dobrada a 45°
blindagem completa para baixo

Ref.: 3S45FUS

Ponta de 3mm dobrada a 45°
blindagem parcial para cima

Ref.: 3S45FI

Ponta de 3mm dobrada a 45°
blindagem parcial para baixo; alta velocidade

Ref.: C3S45FU

Ponta de 3mm dobrada a 10°
blindagem distal completa para baixo; alta velocidade

Ref.: C3L10DS

Cânula tipo baioneta, ponta de 3mm dobrada a 45°
blindagem completa para baixo

Ref.: B3S45FUS

Cânula tipo baioneta, ponta de 3mm dobrada a 45°
blindagem parcial para baixo

Ref.: B3S45FU

TORNIQUETE PNEUMÁTICO

Registro ANVISA: 80109170001



ROBUSTO E CONFIÁVEL

O torniquete pneumático clássico da Riester é um dispositivo fiável que restringe a circulação sanguínea nos membros

O torniquete komprimeter possui um manómetro preciso, para leitura da pressão.

Componentes:

- Manômetro
- Bomba
- Manguito
- Alavanca
- Válvula de escape
- Adaptador de conexão do tubo (macho)
- Adaptador de conexão do tubo (fêmea)
- Clipe do Manômetro para prender no Manguito


Torniquete Pneumático

Ref.: H133-10101



AQUANOT

Registro ANVISA: ISENTO

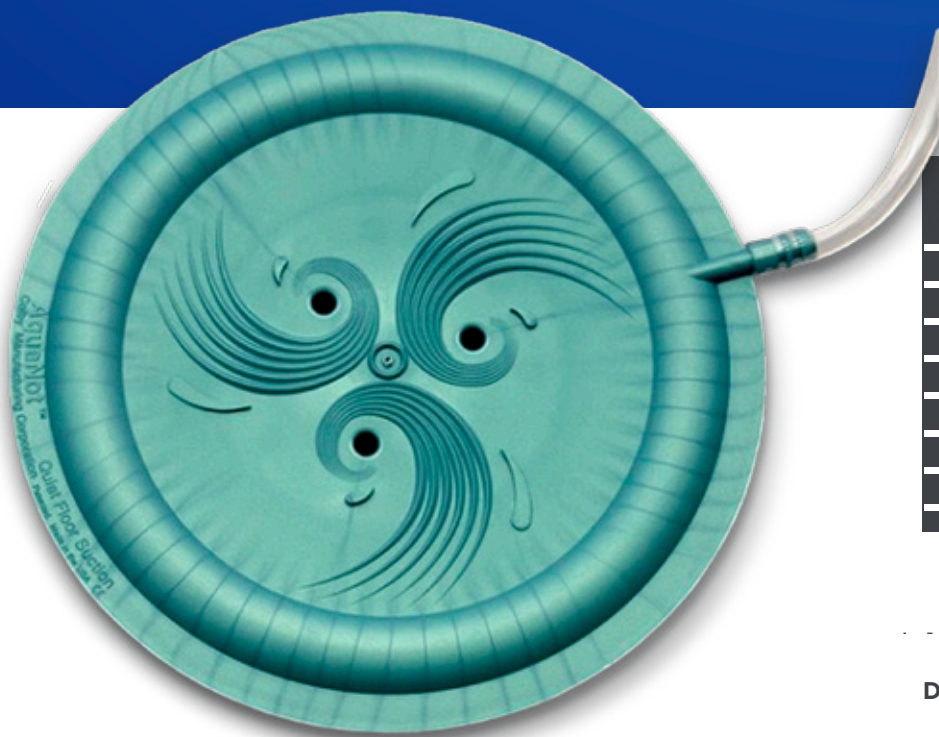

A MEM Cirúrgica oferece um silencioso dispositivo de aspiração de piso que de forma eficiente aspira resíduos líquidos para ajudar a manter o piso seco, limpo e livre de deslizamentos durante os procedimentos com fluidos intensos.

O AquaNot® é um disco de aspiração de líquido que pode ser empurrado no chão com o pé. Seu uso ajuda a reduzir acidentes associados a pisos molhados e a proteger profissionais da área médica e equipe de limpeza do contato com substâncias contaminadas.



DIFERENCIAIS

- Perfil super baixo, maximiza espaço de armazenamento;
- Desliza com mínimo esforço, é facilmente movimentado pela sala de cirurgia;
- Funcionamento extremamente silencioso, não irá atrapalhar o caso cirúrgico;
- Aspira quantidades ilimitadas de fluido do chão da sala de cirurgia;
- Peso leve, oferece frete mais barato e menor custo no descarte;
- Aspira à partir das superfícies superior e inferior;
- Não estéril;
- Não feito com látex de borracha natural.

Disco de Aspiração de Líquido Solo

Ref.: 97060



MANTAS SURGISAFE

Registro ANVISA: ISENTO

As Mantas Surgisafe® oferecem proteção para os equipamentos e todos os envolvidos na sala cirúrgica, diminuindo riscos de acidente de trabalho e contaminação.

Por se tratar de um produto descartável, os custos com lavanderia e preparo da sala para o próximo procedimento diminuem consideravelmente, além disso, teremos uma sala organizada melhorando o acesso e trânsito durante o processo.



DIFERENCIAIS

- Descartáveis
- Preparo rápido da sala cirúrgica
- Diminuição dos custos com lavanderia

Manta Absorvente - 30" x 40"

Ref.: 83030

Manta Absorvente - 30" x 72"

Ref.: 81860




TUBO PLÁSTICO PARA CENTRIFUGA

Registro ANVISA: ISENTO

O Tubo Plástico para Centrifuga com capacidade de 20 ml possui diâmetro estreito, porém maximizado, e um design exclusivo em forma de “Y” com estreitamento. Este design torna mais fácil a extração dos hemocomponentes e é adequado a todos os tipos de centrifuga.

O Tubo possui 1 par de asas de segurança que sustenta a parte superior do corpo do tubo a qual é maior e mais pesada do que as partes inferiores. O importante papel das asas de segurança está em manter a estabilidade do tubo, o qual não balança com a alta velocidade de rotação da centrifuga, sendo, portanto possível obter hemocomponentes de boa qualidade.

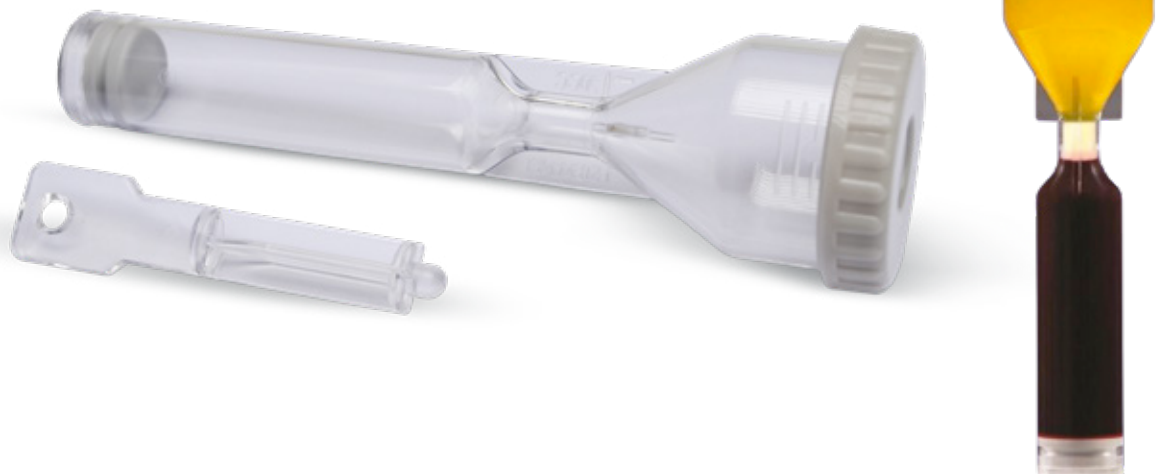

Tubo Plástico para Centrifuga - 20 ml

Ref.: Y - STEM 2.0

RFID SMART CABINET

Registro ANVISA: ISENTO



Solução digital abrangente para gerenciar dispositivos valiosos médicos e estoques em consignação.

A única solução completa no mercado que permite:

- Gerenciamento completo de cada item, incluindo implantes;
- Uma ligação direta entre os distribuidores e o local de uso
- 98% de captura de carga



SMART CABINET - 205x96x55cm



Cirúrgica

SOLUÇÕES SEM FRONTEIRAS PARA A SAÚDE